



CY006
Русский

CYANHemato

Гематологический Анализатор

**Поставляется с БЕСПЛАТНЫМ
стартовым комплектом для
600 тестов!**



Уважаемые работники здравоохранения,

Спасибо за ваш интерес, мы ценим это!

Cypress Diagnostics предоставляет все необходимые инструменты и растворы для клинических лабораторий по всему миру для получения четких и точных диагностических результатов.

Мы производим оборудование, необходимое для работы с образцами, анализаторы для выполнения тестирования, реактивы для проведения тестов и все больше и больше, платформы программного обеспечения для отчетов о результатах.

Cypress Diagnostics является поставщиком для малых и средних клинических лабораторий.

Мы, компания, ориентированная на качество, имеющая сертификат ISO и CE утвержденную продукцию. Наши производственные мощности расположены в Hulshout, Бельгия. Наша продукция является предпочтительной и оценена в более чем 100 странах по всему миру. Компания Cypress Diagnostics является семейным бизнесом. Мы были основаны в 1995 году в городе Левен, Бельгия.

Мы работаем исключительно через отобранных и обученных дистрибьюторов.

Мы продаем качественные инструменты и обслуживание клиентов является неотъемлемой частью нашей политики в области качества.


Все наши продукты поставляются с послепродажным обслуживанием и гарантией производительности. Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нашим местным дистрибьютором для получения дополнительной информации.

Наши последние инструкции и каталоги можно скачать на www.diagnostics.be.

Проверьте разницу!

С уважением,

Команда Cypress Diagnostics

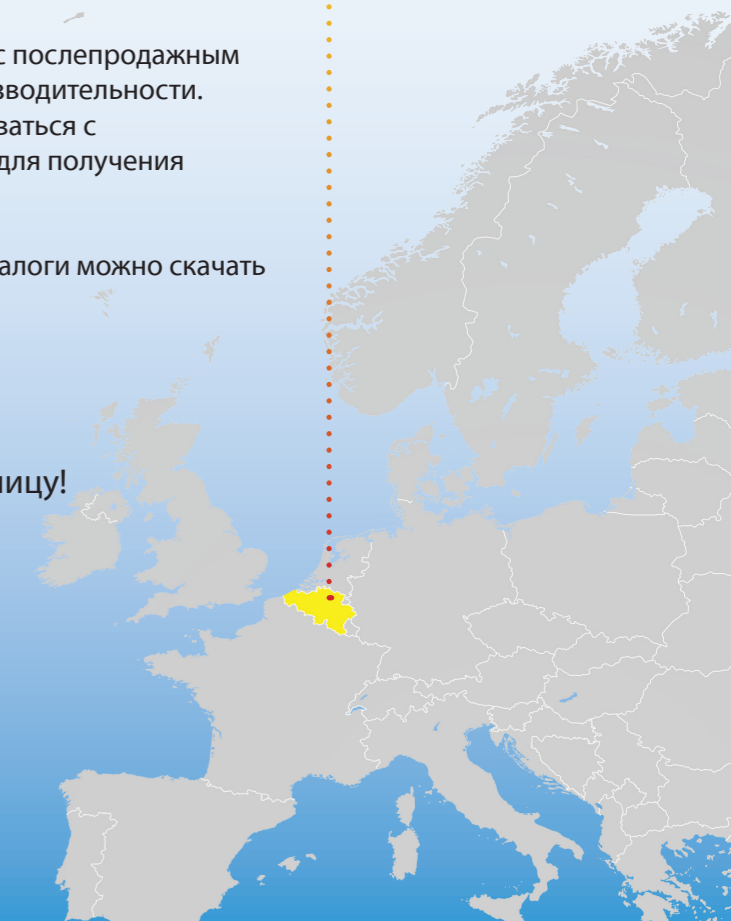



CYANHemato: Гематологический Анализатор

CYANHemato является полностью автоматизированным, 20-параметровым, настольным гематологическим счетчиком клеток. Анализатор может обрабатывать 30 проб в час в трехэтапном дифференциальном режиме WBC (общее число лейкоцитов).

Преимущества:

- 20 гематологических параметров
- Дифференциация 3-компонентного WBC
- Необходимо только 25 мкл образца цельной крови
- Простота в использовании
- Сенсорный цветной ЖК-экран
- Подключение USB
- Режим предварительного разведения
- Автоматическое ежедневное обслуживание
- Большой объем памяти
- Эффективное программное обеспечение КК

Код	Наименование	Упаковка	CE	T°	
				2 - 8 °C	15 - 30 °C
Реагенты					
CY006-R02	Лизат 1л	1 L	•		•
CY006-R03	Очиститель 1л	1 L	•		•
CY006-R01	Растворитель 20л	20 L	•		•
Очищающие растворы					
CY006-R04	Нурослеп 1л	1 L	•		•
CY006-R06	Гипоклин СС 100 мл	100 мл	•		•
CY006-R05	Промыватель 1 л	1 L	•		•
Контроль					
CY006-C01A	Флакон контрольный нормальный	1 x 2,5 мл	•	•	
CY006-C02A	Флаконы контрольные Низкий/Норм/Высокий	3 x 2,5 мл	•	•	

Все реагенты и чистящие средства со стабильностью открытой бутылки 120 дней после открытия. Это единственные реагенты, которые калибруются для CYANHemato (закрытая система).

Значения гематологических контролей могут быть загружены в CYANHemato посредством USB. Вы можете скачать эти файлы (INI) с нашего вебсайта.

Технические Характеристики

Анализатор определяет следующие 20 гематологических параметров:

- LYM - число лимфоцитов
- MON - число моноцитов
- GRA - число гранулоцитов
- LYM% - % лимфоцитов
- MON% - % моноцитов
- GRA% - % гранулоцитов
- HGB - концентрация гемоглобина
- RBC - число эритроцитов
- HCT - гематокрит
- MCV - средний объем эритроцитов
- MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроците
- MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците
- RDW* - ширина распределения эритроцитов по объему, т.е. степень анизоцитоза эритроцитов
- PLT - число тромбоцитов
- PCT - тромбокрит
- MPV - средний объем тромбоцитов
- PDW* - ширина распределения тромбоцитов по объему
- P-LCC подсчет клеток больших тромбоцитов
- P-LCR соотношение клеток больших тромбоцитов

Объем образца:

- 25 мкл цельной крови в нормальном режиме
- 50 мкл цельной крови в режиме предварительного разбавления

Измерение:

- Диафрагма диаметром 70 мкм (RBC, PLT, WBC)
- Пропускная способность 30 Тестов / час

Требования к реагентам:

- Разбавитель - 20 литров (код: CY006-R01)
- Lyse - 1 л (код: CY006-R02)
- Cleaner - 1 л (код: CY006-R03)

Пользовательский интерфейс:

- Простота в использовании
- Сенсорный экран полный ЖК
- Внешняя клавиатура (опция, с помощью USB)
- Языки: английский, французский, испанский, португальский и русский

Контакты: e-mail: cypress@diagnostics.be
 тел: + 32 (0)15 67 67 68
 Nijverheidsstraat 8
 2235 Hulshout
 Бельгия
 Сайт: www.diagnostics.be

Отбор проб:

- Открытая система трубок
- Автоматический ротор образцов
- Несколько профилей образца

Процедура очистки диафрагмы:

- Сгорание под высоким напряжением
- Промывка под высоким давлением
- Химическая чистка

Калибровка:

- Автоматическая калибровка на основе ≥ 1 измерения (с)
- Ручная калибровка с помощью теоретических факторов

Память:

- 10.000 результатов, с RBC, PLT и WBC 3-этапной гистограммой

Принтер:

- Встроенный термопринтер
- Полный отчет с гистограммами
- Интерфейс через USB для принтеров HP

Питание:

- 110/220 В - 50/60 Гц
- Рекомендовано: Электронный стабилизатор (> 1 кВт потенциал мощности) Бесперебойный модуль (ИБП - источник бесперебойного питания)

Рабочая температура:

- 15 - 30 °C
- В закрытых и сухих местах,
- Стабильная поверхность (отсутствие вибраций)

Вес и размеры:

- 32 x 26 x 36,5 см (Д x Ш x В)
- 12 кг

Код заказа:

- CY006: CYANHemato

Ваш Дистрибьютор

CYANHemato RU 2021-09